



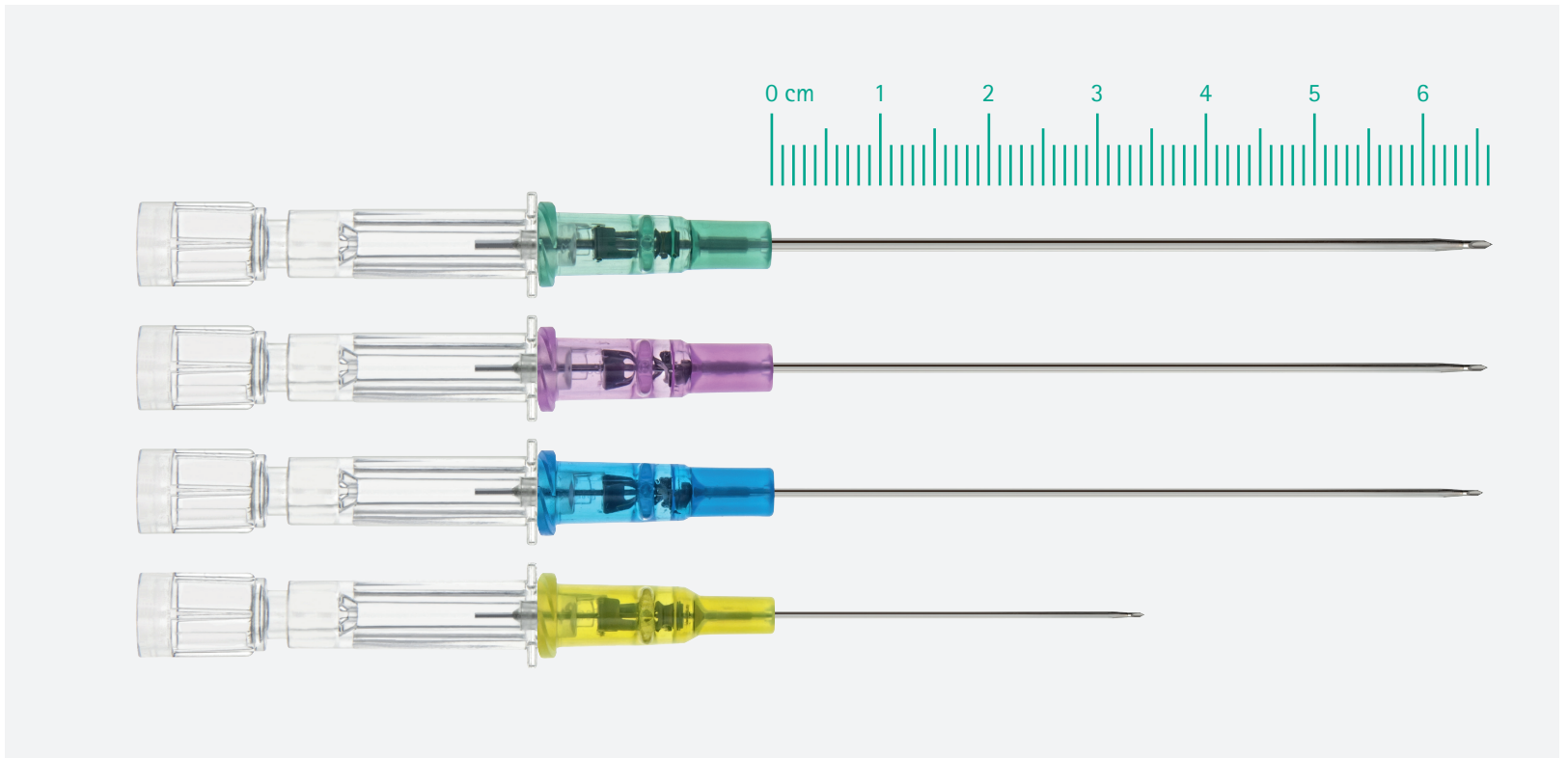
EXTRA LANG

# Introcan Safety<sup>®</sup> Deep Access

Extra lange Sicherheits-Venenverweilkanüle  
für erschwerten intravenösen Zugang

# Introcan Safety® Deep Access

Extra lange Sicherheits-Venenverweilkanüle



Introcan Safety® Deep Access Katheter sind so konzipiert, dass sie auch bei schwierigen Venenverhältnissen mehr Flexibilität bei der Auswahl geeigneter Venen bieten. Die längere Kapillare verhindert ausserdem nach der Punktion das Verrutschen des Katheters in der Vene.

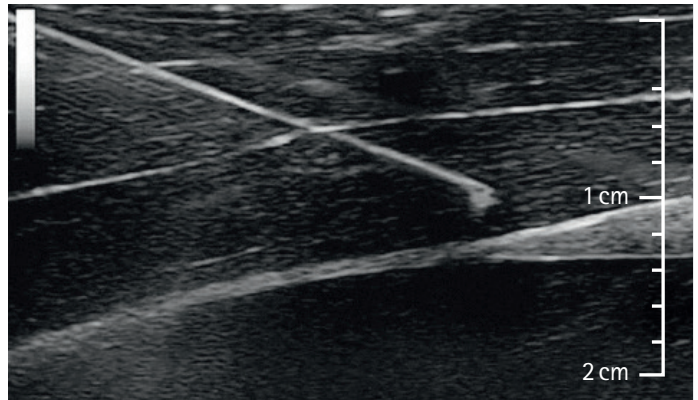
Die extra langen Sicherheits-Venenverweilkanülen ergänzen das Portfolio von Introcan Safety® und weisen die selben Merkmale und Vorteile auf.

## VORTEILE

- Die extra lange Kanüle ermöglicht Zugang zu tief liegenden Venen und bietet damit mehr Flexibilität bei der Suche nach einer geeigneten Vene
- Ein längerer Katheter in der Vene hilft, eine Dislokation der Katheterspitze und Infiltrationen zu verhindern
- Gute Sichtbarkeit unter Ultraschall für eine sichere und erfolgreiche Platzierung
- Mühelose und schmerzarme Punktion in unterschiedlichsten Winkeln durch atraumatische Kanülenspitze mit back cut-Schliff
- Passiver Sicherheitsmechanismus: Ein Sicherheits-Clip sichert die Nadelspitze sofort und automatisch nach dem Herausziehen




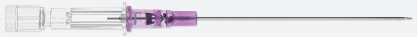

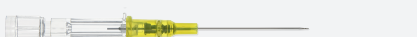
Gut sichtbar unter Ultraschall



Originalfoto Introcan Safety®

# Introcan Safety<sup>®</sup> Deep Access

## Sortimentsübersicht

Introcan Safety <sup>®</sup> Deep Access	Gauge	Länge (mm)	Aussen ø (mm)	Durchflussrate (ml/min)	Art.-Nr.	Pharmacode
	■ 18	64	1.3	85	4251620-01	7773381
	■ 20	64	1.1	51	4251621-01	7773382
	■ 22	64	0.9	24	4251622-01	7773383
	■ 24	32	0.7	17	4251623-01	7773384

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)