

Venofix[®] Safety

Flügelkanülen mit Sicherheitsmechanismus



Vascular Access

- Einfache Aktivierung während der Anwendung
- Aktivierung in der Vene – kein Kontakt mit einer kontaminierten Kanüle
- Hörbarer Klick – bestätigt die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus
- Einmal aktiviert – bleibt der Sicherheitsmechanismus verriegelt

Venofix® Safety

Sicherheit muss nicht schwierig sein


Mit der Venofix® Safety bietet Ihnen B. Braun ein Sicherheits-Venenpunktionsbesteck zur kurzzeitigen Infusion.

Die Venofix® Safety bietet Ihnen Sicherheit vor einer Nadelstichverletzung. Die Anwendung bleibt einfach. Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus noch während die Kanüle in der Vene liegt, ist eine klare Weiterentwicklung in der Safety-Technologie. Die Kanüle verschwindet komplett im Gehäuse und der Sicherheitsmechanismus bleibt verriegelt. Grosse flexible Flügel erleichtern das Punktieren und die Fixierung.



Aktivierung des Sicherheitsmechanismus

Der Sicherheitsmechanismus der Venofix® Safety kann einhändig aktiviert werden, während die Kanüle noch in der Vene liegt.

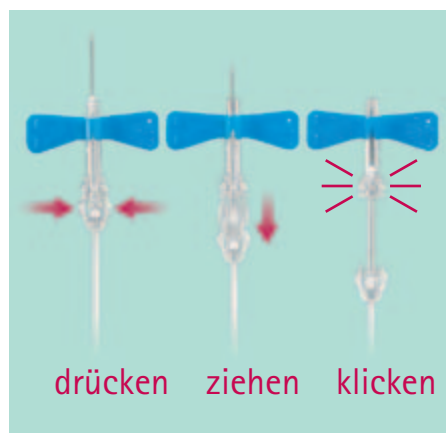

Sicherheit die Sie fühlen und hören können

Auf beiden Seiten des Kanülenkonnektors drücken, dabei die Kanüle zurückziehen bis ein leichtes Einschnappen spürbar und ein Klicken zu hören ist.

Venofix® Safety

Grösse (G)	Grösse (mm)	Schlauchlänge (cm)	Durchfluss (ml/min)	Restvolumen (ml)	Bestellnummer (REF)
25	0.5	30	4	0.48	4056500-01
23	0.65	30	8	0.49	4056510-01
21	0.8	30	20	0.49	4056520-01
21	0.8	19	20	0.36	4056521-01
19	1.1	30	37	0.56	4056519-01

Luer-Lock-Ansatz mit Verschlusskonus, Verkaufseinheit 50 Stück.