




# Comfort Therapieliegen

Höchster Komfort und attraktives Design kombiniert  
mit Funktionalität und Sicherheit

# Comfort Therapieliegen Übersicht

Hochmoderne medizinische Sitzlösungen für eine hochwertige Patientenversorgung. Die medizinischen High-Tech-Stühle lassen sich, einschliesslich Design und intelligenten Komfort- und Sicherheitsmerkmalen, perfekt anpassen. Das Comfort-Sortiment besteht aus folgenden Ausführungen:

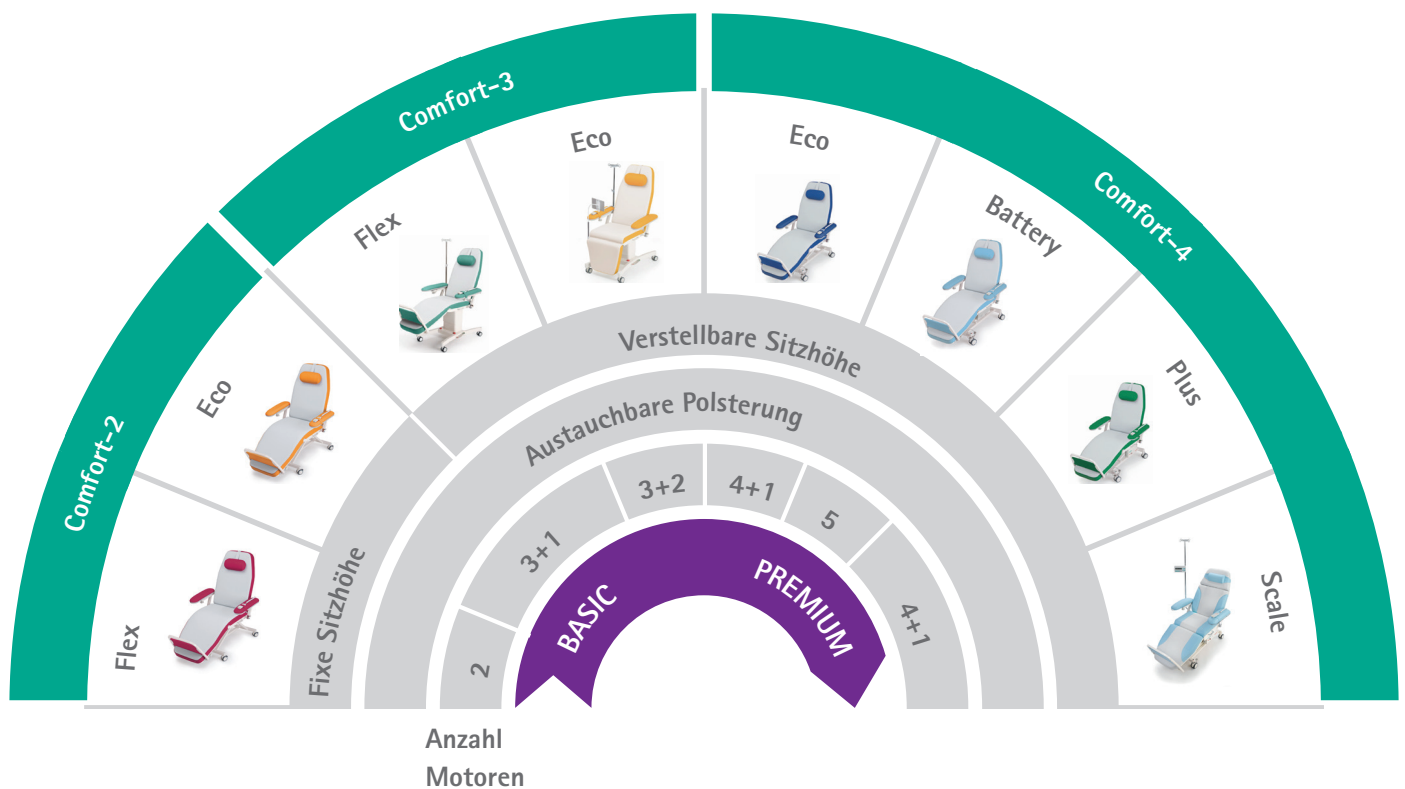

# Ausstattungserklärungen

## Intelligente Steuerung

Mehrere unabhängige Einstellmöglichkeiten bieten ein Maximum an Komfort für den Patienten und reduzieren die Arbeitsbelastung für das Personal. Je nach Anzahl Motoren gibt es verschiedenste Einstellmöglichkeiten.



## Benutzerfreundliche Handbedienung

Der langlebige Mikroschalter befindet sich unter einer austauschbaren Tastaturfolie und einem flüssigkeitsdichtem Gehäuse mit Schutzart IP 67. Je nach Ausführung gibt es unterschiedliche Anzahl Tasten.

Mit der gelben Einstiegstaste kann die Liege aus jeder vorherigen Position automatisch in die aufrechte Stellung bei niedrigster Höhe gebracht werden, damit der Patient sich bequem auf den Stuhl setzen bzw. aufstehen kann. Mit der roten Trendelenburg-Taste kann die Kopftieflage aus jeder vorherigen Position heraus erreicht werden, wobei auch die Behandlungshöhe eingestellt wird.

## Trendelenburg-Position

Die Trendelenburg-Position kann mit der Handbedienung erreicht werden. Als Option kann entweder eine Fusstaste oder eine rote Notfalltaste an der Liege befestigt werden.

## Auswechselbare Polsterung

Die Polsterung kann zur Reinigung oder Wartung mit wenigen Handgriffen leicht entfernt werden. Die Polsterung besteht aus blutresistentem Kunstleder, das auch gegen Desinfektionsmittel und Urin beständig ist. Anstelle der hellgrauen Standardpolsterung sind mehr als 50 alternative Farben auf Anfrage erhältlich.

## Bremssystem/Rollen

Je nach Ausführung gibt es unterschiedliche Bremssysteme und Rollen:

- Rollen mit 7.5 cm Durchmesser mit Einzelbremsen
- Doppelrollen mit 7.5 cm Durchmesser mit zentralem Bremssystem
- Rollen mit 10 cm Durchmesser mit Einzelbremsen
- Doppelrollen mit 10 cm Durchmesser mit zentralem Bremssystem

Diese Bremssysteme / Rollen können als Optionen angepasst werden.

## Armlehne

Die Standard-Armlehne ist gepolstert und lässt sich für den bequemen Einstieg nach oben wegschwenken.

Zusätzlich kann sie in der Höhe verstellt werden. Optional existiert eine zusätzlich winkelverstellbare Armlehne (Flexible Armlehne).

## SSP-Motorsteuerung

Als Option kann eine regulierte Motorsteuerung für eine sanfte Positionsänderung ausgewählt werden.

Sie bietet dem Patienten bei der Handhabung von Einstellungen mehr Sicherheit und Komfort.

## Zusatzoptionen

- Leselampe LED mit flexiblem Arm
- USB-Ladegerät für smarte Geräte (5V, 1A)
- Papierrollenhalter
- Kopfstütze mit Lautsprechern
- Verstellbare Halterung für Tablets

# Comfort-2 Flex Therapieliege

Therapiestuhl mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis

ART.-NR. 723C2F00



Informationen	Comfort-2 Flex
Feste Sitzhöhe	62 cm
Grösse der Rollen	4 × Ø 7,5 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-15° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	63 kg
Einstellung Sitzneigung	14°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fussstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 210 × W 60 × H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	11
Anzahl Motoren	3 (Rückenlehne, Sitzneigung, Beinstütze; Fussstütze als Option)
Armstütze Grösse	L 57 × W 15 × H 6.5 cm
Fussstütze elektronisch	Als Option erhältlich

# Comfort-2 Eco Therapieliege

Höchster Komfort, attraktives Design sowie Funktionalität und Sicherheit

ART.-NR. 723C2E00



Informationen	Comfort-2 Eco
Feste Sitzhöhe	65 cm
Grösse der Rollen	4 × Ø 7,5 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-7° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	63 kg
Einstellung Sitzneigung	14°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fusstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 210 × W 60 × H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	11
Anzahl Motoren	2 (Rückenlehne, Beinstütze; Sitzhöhe und Fusstütze als Optionen)
Armstütze Grösse	L 57 × W 15 × H 6.5 cm

# Comfort-3 Flex Therapieliege

Schlankes und attraktives Design, weniger Platzbedarf  
Längere Beinstütze mit Fußstütze – empfohlen für Langzeitbehandlungen

ART.-NR. 723C2F00



Informationen	Comfort-3 Flex
Feste Sitzhöhe	62 cm
Optionale Höhenverstellung	55-70 cm
Dimensionen in Sitzposition	L 145cm x W 87.5 cm
Grösse der Rollen	4 x Ø 7,5 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-14° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	65 kg
Einstellung Sitzneigung	14°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fusstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 210 x W 60 x H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	13
Anzahl Motoren	3 (Rückenlehne, Sitzhöhe und Beinstütze; Sitzhöhe und Fusstütze als Optionen)
Armstütze Grösse	L 57 x W 15 x H 6.5 cm

# Comfort-3 Eco Therapieliege

Schlankes und attraktives Design, weniger Platzbedarf, niedrigere Sitzhöhe für leichteren Einstieg von der Vorderseite – empfohlen für Kurzzeitbehandlung

ART.-NR. 723C3E00



Informationen	Comfort-3 Eco
Feste Sitzhöhe	55 cm
Optionale Höhenverstellung	55-70 cm
Dimensionen in Sitzposition	L 99 x W 92.5 x H 139
Grösse der Rollen	4 x Ø 7,5 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-14° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	65 kg
Einstellung Sitzneigung	14°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fusstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 195 x W 60 x H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	11
Anzahl Motoren	2 (Rückenlehne, Sitzneigung und Beinstütze; Sitzhöhe als Option)
Armstütze Grösse	L 57 x W 15 x H 6.5 cm

# Optionen zu Comfort-2 & Comfort-3

Optionen	Art-Nr.
EPN-Kit inkl. Multikontaktstift mit internem Anschlusskabel – empfohlen für Dialysen	713E004
Wiederaufladbarer Batterie-Backup-Betrieb bei Stromausfall (24V DC)	713E006
Leselampe mit LED-Licht	713E008
USB-Ladegerät für smarte Geräte (5V, 1A)	713E009
Anschlusskabel (3 m) für den Potenzialausgleich (EPN)	713E012
Comfort-T2 Multifunktionsstisch	713M009
Flexibel höhenverstellbare Armlehne für universelle medizinische Anwendungen (ein Paar)	713M010
Integrierte Gasfeder in der Armstütze für einen sanfteren und sichereren Betrieb (ein Paar)	713M011
Schiebegriff	713M012
Halter Tablets & Smartphones	713M013
4x Doppelrolle 10cm Durchmesser und zentrales Bremssystem	713M021
Abnehmbare Fußstütze für eigenständige Übungsanwendungen	713M031
Motorisierte Fußstütze	713M032



Optionen	Art-Nr.
Papierrollenhalter	713M033
Infusionsflaschenhalter (IV-Stange) mit Höhenverstellung	713M038
Individuelles Logo auf Polster	713U011
Kopfstützenkissen quadratisch	713U012
DuoShape-Polsterung in individueller Farbkombination (40 diff. Farben) TUNDRA	713U026
Transparente schützende Kunststoffabdeckung für die Fußstütze	713U027
Transparente Schutzabdeckung aus Kunststoff für die Beinstütze, einstellbar zwischen 0° und -30° unter der Horizontalen	713U028
DuoShape-Polsterung mit 110 mm Dicke in Standard-Chrom-Perle-Farbkombination	713U031
DuoShape-Polsterung mit 110 mm Dicke in individueller Farbkombination (40 diff. Farben) TUNDRA	713U032
DuoShape-Polsterung mit Memory-Schaum in Standard-Chrom-Perle-Farbkombination	713U033
DuoShape-Polsterung mit Memory-Schaum in individueller Farbkombination (40 diff. Farben) TUNDRA	713U034
DuoShape-Polsterung mit flammhemmender Kunstlederkombination (15 verschiedene Farben) PALMA	713U035

# Comfort-4 Eco Therapieliege

Therapiestuhl mit variabler Höhe und austauschbarer Polsterung

ART.-NR. 723C4E00



Informationen	Comfort-4 Eco
Sitzhöhe	55 – 77 cm
Grösse der Rollen	4 × Ø 10 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Dimensionen in Sitzposition	L 99 x W 92.5 x H 139
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-13° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	80 kg
Einstellung Sitzneigung	20°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fussstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 210 × W 60 × H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	11
Anzahl Motoren	4 (Rückenlehne, Sitzneigung, Sitzhöhe und Beinstütze; Elektronische Fussstütze als Option)
Armstütze Grösse	L 57 × W 15 × H 6.5 cm

# Comfort-4 Battery Therapieliege

Therapiestuhl mit variabler Höhe und austauschbarer Polsterung

ART.-NR. 723C4B00



Informationen	Comfort-4 Battery
Sitzhöhe	55 – 77 cm
Grösse der Rollen	4 × Ø 10 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Dimensionen in Sitzposition	L 99 x W 92.5 x H 139
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-13° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	80 kg
Einstellung Sitzneigung	20°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fussstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 210 × W 60 × H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	13
Anzahl Motoren	5 (Rückenlehne, Sitzneigung, Sitzhöhe und Beinstütze, elektronische Fussstütze)
Armstütze Grösse	L 57 × W 15 × H 6.5 cm

# Comfort-4 Plus Therapieliege

Therapiestuhl mit intelligenter Steuerung

ART.-NR. 723C4P00



Informationen	Comfort-4 Plus
Sitzhöhe	55 – 77
Dimensionen in Sitzposition	L 145 x W 92.5 x H 80.5 (je nach Armstütze und Fusstütze)
Grösse der Rollen	4 x Ø 10 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-13° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	80 kg
Einstellung Sitzneigung	20°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fusstütze	25 cm
Grösse Polsterung	L 210 x W 60 x H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	16
Anzahl Motoren	4 (Rückenlehne, Sitzneigung, Sitzhöhe und Beinstütze; Elektronische Fusstütze als Option)
Armstütze Grösse	L 57 x W 15 x H 6.5 cm
Intelligentes Kontrollsystem	Ja
SSP Motorkontrolle	Ja

# Comfort-4 Scale Therapieliege

## Therapiestuhl mit Präzisionsgewichtsmesssystem

ART.-NR. 7130368W



Es bietet eine kontinuierliche Überwachung des Patientengewichts und der Gewichtsveränderung während der Behandlungen.

Informationen	Comfort-4 Scale
Sitzhöhe	54 – 76
Dimensionen in Sitzposition	L 145 x W 92.5 x H 80.5 (je nach Armstütze und Fusstütze)
Grösse der Rollen	4 x Ø 10 cm Doppelrollen mit Einzelbremsen
Verstellbereich der Rückenlehne	80° (-13° unter der Horizontale in Trendelenburg-Lage)
Gewicht Stuhl	95 kg
Einstellung Sitzneigung	20°
Maximales Patientengewicht	200 kg
Einstellung Beinstütze	30°
Einstellung Fusstütze	29 cm
Grösse Polsterung	L 215 x W 60 x H 9.5 cm
Anzahl Knöpfe Bedienung	13
Anzahl Motoren	4 (Rückenlehne, Sitzneigung, Sitzhöhe und Beinstütze; Elektronische Fusstütze als Option)
Armstütze Grösse	L 57 x W 15 x H 6.5 cm
Intelligentes Kontrollsystem	Ja
SSP Motorkontrolle	Nein

# Optionen zu Comfort-4

Optionen	Art-Nr.
Trendelenburg-Fusschalter auf beiden Seiten des Untergestells	713E005
Anschlusskabel (3 m) für den Potenzialausgleich (EPN)	713E012
Anschlusskabel (3 m) für den Potenzialausgleich (EPN)	713E014
Wiederaufladbarer Batterie-Backup-Betrieb bei Stromausfall (24V DC)	713E015
SSP-Motorsteuerung für reibungslosen Betrieb (Soft-Start-Stop-Verfahren)	713E017
4-Kanal-Audioeinheit (in der Steuerbox eingebaut)	713E018
Kopfstützenkissen mit eingebauten Stereolautsprechern (nur in Verbindung mit einer 4-Kanal-Audioeinheit)	713E019
Eingebautes medizinisches Netzteil (9-12V DC)	713E020
Comfort-T2 Multifunktionstisch	713M009
Flexibel höhenverstellbare Armlehne für universelle medizinische Anwendungen (ein Paar)	713M010
Integrierte Gasfeder in der Armstütze für einen sanfteren und sichereren Betrieb (ein Paar)	713M011
Schiebegriff	713M012
Universalhalterung für Tablets und Smartphones	713M013
Abnehmbare Fussstütze für eigenständige Übungsanwendungen	713M031
Motorisierte Fussstütze	713M032

Optionen	Art-Nr.
Papierrollenhalter	713M033
Infusionsflaschenhalter (IV-Stange) mit Höhenverstellung	713M038
4x Doppelrolle 10 cm Durchmesser und zentrales Bremssystem	713M040
4 x Doppelrolle 12.5 cm Durchmesser und zentrales Bremssystem	713M041
Individuelles Logo auf der Polsterung	713U011
Kopfstützenkissen quadratisch	713U012
DuoShape-Polsterung in individueller Farbkombination (40 diff. Farben) TUNDRA	713U026
Transparente schützende Kunststoffabdeckung für die Fusstütze	713U027
Transparente Schutzabdeckung aus Kunststoff für die Beinstütze, einstellbar zwischen 0° und -30° unter der Horizontalen	713U028
DuoShape-Polsterung mit 110 mm Dicke in Standard-Chrom-Perle-Farbkombination	713U031
DuoShape-Polsterung mit 110 mm Dicke in individueller Farbkombination (40 diff. Farben) TUNDRA	713U032
DuoShape-Polsterung mit Memory-Schaum in Standard-Chrom-Perle-Farbkombination	713U033
DuoShape-Polsterung mit Memory-Schaum in individueller Farbkombination (40 diff. Farben) TUNDRA	713U034
DuoShape-Polsterung mit flammhemmender Kunstlederkombination (15 verschiedene Farben) PALMA	713U035

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)