

Protezione UV trasparente per la terapia infusioneale

UV-protect di B. Braun



Terapia infusioneale

A cosa serve la protezione dalla luce nella terapia infusionale?



Lo sapevate che numerosi farmaci devono essere protetti dall'esposizione alla luce? Siete consapevoli delle conseguenze derivanti dall'uso di questi farmaci senza accessori con protezione UV?

Alcuni farmaci possono soffrire di uno scadimento qualitativo, qualora il principio attivo venga esposto alla luce per un lungo periodo di tempo, per esempio:

- antifettivi
- principi attivi antineoplastici / principi attivi citotossici
- farmaci per il sistema nervoso vegetativo
- farmaci per il sistema circolatorio
- farmaci per il SNC
- principi attivi liquidi ed elettroliti
- farmaci gastrointestinali
- vitamine

I farmaci sensibili alla luce devono essere trattati con cautela, altrimenti un'alterazione fotochimica delle loro componenti potrebbe influenzare sfavorevolmente la terapia del paziente. Da una parte non è da escludere una riduzione di efficacia, che dipende da diversi fattori quali la sensibilità del farmaco alla luce, la velocità di infusione e l'intensità della luce. Dall'altra parte un'alterazione fotochimica può causare la formazione di sostanze tossiche.


Precauzioni speciali per i medicinali sensibili alla luce




Per l'utilizzo di medicinali sensibili alla luce B. Braun offre già da diversi anni un ampio spettro di accessori che consentono una manipolazione con protezione dalla luce. Ora B. Braun ha sviluppato l'ultimissima generazione di accessori con protezione dalla luce per ogni via di somministrazione utilizzata per le infusioni. La nuova generazione dispone della stessa protezione affidabile contro la luce degli accessori opachi e, oltre a ciò, offre un plus di sicurezza. I dispositivi ottimizzati e fabbricati con materiali senza PVC e DEHP sono trasparenti, consentendo di riconoscere con rapidità e facilità l'eventuale presenza di bollicine d'aria o particelle nel sistema infusoriale.

B. Braun offre il portfolio completo per ogni applicazione nell'ambito della terapia infusoriale. Il tratto caratteristico della gamma di articoli UV-protect è la colorazione arancione.


I prodotti UV-protect di B. Braun garantiscono:

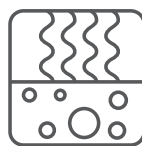

visibilità delle
bollicine d'aria

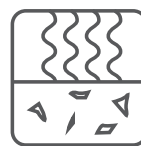


visibilità delle
particelle

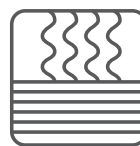

fotostabilità

Sempre al sicuro con i prodotti trasparenti UV-protect di B. Braun

Medicamenti che necessitano di protezione dalla luce

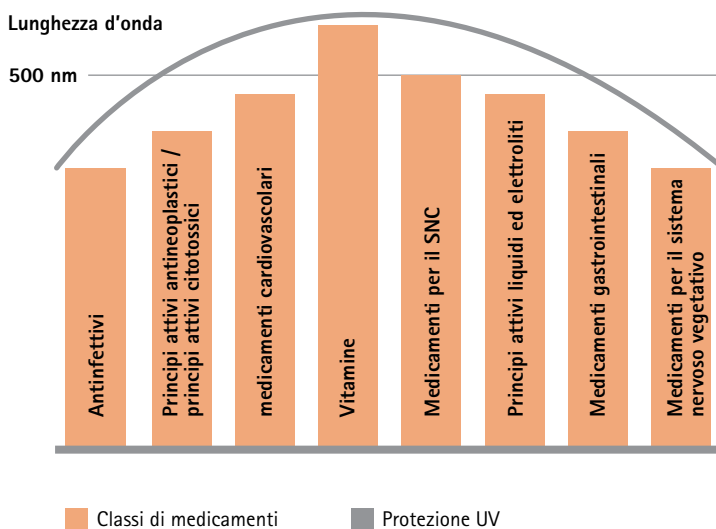

Leggere attentamente le informazioni professionali dei rispettivi medicinali.

Non tutti i medicinali che necessitano di una protezione contro la luce sono sensibili alle stesse lunghezze d'onda. Alcuni medicinali, per es. i preparati multivitaminici, richiedono una protezione dalla luce fino a una lunghezza d'onda di 520 nm. Gli accessori di B. Braun con protezione dalla luce coprono l'intero spettro di medicinali sensibili alla luce.



Materiale
trasparente

Protezione dalla luce
fino a una lunghezza
d'onda di 520 nm

Tipica colorazione
arancione

Senza PVC e DEHP

Vantaggi per l'utilizzatore

- tutti i medicinali sensibili alla luce sono protetti senza eccezioni
- possibilità di riconoscimento di bollicine d'aria e particelle
- sicurezza grazie a prodotti completamente protetti contro i raggi UV
- immediatamente pronti all'uso! Nessuna ulteriore procedura di preparazione come, per esempio, la copertura con foglio di alluminio, per risparmiare tempo e risorse
- più facile riconoscimento degli accessori con protezione UV (colorazione arancione)
- viene evitato il contatto con DEHP
- ecologico grazie ai materiali senza PVC

Soluzioni trasparenti di B. Braun con protezione UV ...

Intrafix® SafeSet e Intrafix® Primeline



► Sistemi a gravità



Infusomat® Space Line SafeSet



► Infusomat® Space



Intrafix®	Unità	Cod. art.	Pharma-code
Intrafix® Primeline UV-protect	100	0086774R	6364625
Intrafix® SafeSet UV-protect	100	4063131	6364631

Infusomat® Space Line SafeSet	Unità	Cod. art.	Pharma-code
Infusomat® Space Line UV-protect	100	8700128SP	6364648
Infusomat® Space Line UV-protect con porta Y senza ago	100	8250438SP	6364654

I medicinali sensibili alla luce vengono impiegati per diverse applicazioni in differenti reparti d'ospedale e in studio medico.

B. Braun offre un portfolio ampiamente diversificato di prodotti trasparenti con protezione dalla luce: dagli strumenti per la preparazione fino ai sistemi di somministrazione a gravità e a pressione.

Tutti i prodotti sono trasparenti e si contraddistinguono per la tipica colorazione arancione; proteggono persino i medicinali con elevata sensibilità alla luce da un'eventuale riduzione di efficacia dovuta all'influsso della luce. Oltre a ciò, i prodotti vengono prodotti con materiali senza PVC. In tal modo possono essere utilizzati per ogni applicazione e sono indicati anche per medicinali non compatibili con il PVC.

... per ogni applicazione

Cyto-Set® Infusomat® Space e Cyto-Set® Mix



► Infusomat® Space

**CLOSED
SYSTEM**



Oncologia

Original Perfusor® siringa e Original Perfusor® linea



► Perfusor® Space



Cyto-Set® Infusomat® Space	Unità	Cod. art.	Pharma-code
Cyto-Set® UV-protect con 3 valvole senza ago	20	8250920SP	6250519
Cyto-Set® UV-protect con 5 valvole senza ago	20	8250820SP	6250548
Cyto-Set® Mix	Unità	Cod. art.	Pharma-code
Cyto-Set® Mix UV-protect Con valvola senza ago	20	A2906N	6250382

Original Perfusor® siringa	Unità	Cod. art.	Pharma-code
Original Perfusor® siringa UV-protect, 50 ml, ago con filtro da 15 µm	100	8728861F-06	6250554
Original Perfusor® linea	Unità	Cod. art.	Pharma-code
Original Perfusor® linea UV-protect, 150 cm, tubo in PE	100	8723017	6271941

