



O' un presidio per stomia flessibile ed ermetico

Softima® Active O'convex

O' che differenza!

Cosa dicono i professionisti di Softima® Active O'convex.



Softima® Active O'convex ha soppiantato vantaggiosamente la convessità rigida e offre maggiori possibilità d'impiego.

Quando è richiesta convessità, la convessità morbida è la mia scelta d'elezione.

Anne von der Drift

Stomaterapista – Hôpital Bichat, Francia



Quando uso Softima® Active O'convex posso far affidamento su un sistema morbido e flessibile e i miei pazienti sono al sicuro da eventuali perdite.

Virginie Lhomme

Stomaterapista – Hôpital Bichat, Francia

In base alla mia esperienza, questa sacca è particolarmente adatta per le stomie piane o lievemente introflesse.

Questa sacca può essere usata anche in presenza di feci liquide, al fine di evitare perdite, prevenendo così le irritazioni della cute peristomale.

Consiglio il prodotto in particolare alle persone sportive e con uno stile di vita attivo. Queste, a loro volta, scelgono la sacca per la sua morbidezza e flessibilità, che costituiscono un criterio importante per le loro attività quotidiane e la qualità della loro vita.

Danièle Chaumier

Stomaterapista, Presidentessa dell'associazione francese AFET



Ogni persona è unica. Diverse forme del corpo, età differenti e disparate esigenze. Ma quasi tutte hanno un problema in comune:

Ossia le perdite dalle stomie.

76%

Nel corso della vita il 76% dei pazienti sperimenta problemi di perdite dai loro presidi per stomie.¹

UNA SOLUZIONE PUÒ ESSERE LA CONVESSITÀ!

Lo scopo di un presidio per stomie convesso è quello di assicurare una buona tenuta tra il sistema-sacca e la cute peristomale.¹

I sistemi convessi possono essere adatti per


- Stomie piane (stomie all' altezza della parete addominale)¹
- Stomie retratte (sotto al livello della pelle dell' addome)¹
- Presenza di pieghe, pliche, cicatrici¹
- Superficie addominale morbida²
- Ileostomie ad alta portata²

Vantaggi della convessità morbida

I prodotti convessi morbidi creano una tenuta attorno alla stomia. Ciò dà fiducia e assicura una miglior qualità della vita.



Massima sicurezza^{2,3}

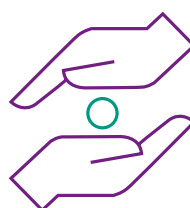


Dermocompatibilità²



Comfort d'uso ottimale³

O' che tenuta eccezionale¹

Softima® Active O'convex può essere la soluzione per mettere al riparo i vostri pazienti dalle perdite dalle stomie e dalle conseguenti irritazioni cutanee. Questa protezione cutanea convessa è più morbida rispetto ad altre placche convesse di B. Braun e pertanto è più dolce e delicata sulla cute peristomiale.⁴

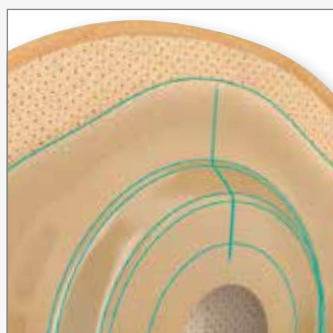

Profondità della convessità 6 mm sviluppata per ottenere una tenuta ottimale attorno alla stomia.⁴



Cintura per stomie B. Braun

Grazie a questa cintura è possibile potenziare l'effetto della convessità.^{3,4}

Softima® Active O'convex offre, su ciascun lato, tre intagli per il fissaggio ottimale della cintura e per una distribuzione ideale della pressione.



Protezione cutanea con convessità morbida

Sviluppata per coniugare flessibilità⁵ e semplice rimozione⁶ della sacca, il tutto grazie all'anello morbido integrato.



O' quanti vantaggi

Oltre alla convessità morbida di Softima® Active O'convex, le sacche offrono i seguenti vantaggi:



Finestrella d'ispezione di grandi dimensioni per le sacche da ileostomia

- Agevola la corretta applicazione della sacca
- Semplice verifica della qualità delle feci
- Controllo della quantità di feci




Sistema di scarico

 per il giorno

- Chiaramente visibile se aperto o chiuso
- Semplice da maneggiare anche in caso di limitata funzionalità delle dita
- Nessun gocciolamento residuo – niente mani o abiti bagnati



 per la notte

- Raccordo a innesto per collegare la sacca da notte
- Clic percettibile al collegamento e all'innesto
- Connessione sicura – niente torsioni del tubo flessibile della sacca da notte



Sistema di scarico Roll'up

- Morsetto morbido autobloccante integrato con chiusura velcrata
- Apertura di scarico larga 7 cm
- Bordi morbidi per maggior comfort
- Design della sacca compatto uguale a quello delle sacche da colostomia

Softima® Active O'convex

PANORAMICA DEI PRODOTTI

	Articolo	Capacità	Unità	Cod. art.	Pharmacode
	Softima® Active O'convex Uro 15-35 mm Midi	670 ml	10	4641715CH	7844747
	Softima® Active O'convex ileostomia Roll'up Midi 15-45 mm, beige con finestrella d'osservatione	600 ml	10	4622716CH	7844748
	Softima® Active O'convex ileostomia, Roll'up Maxi 15-45 mm, beige con finestrella d'osservatione	690 ml	10	4622717CH	7844749

EMAp stomatherapia 29.01.01.00.1

BIBLIOGRAFIA:

- 1 Evans, M & White, P. Selecting convexity to improve and maintain peristomal skin integrity. Br J Nurs. 2020 Sep 0;29(16):S8-S14. doi: 10.12968/bjon.2020.29.16.S8.
- 2 Perrin, A. Convex stoma appliances: an audit of stoma care nurses. Br J Nurs, 2016 Dec 8 ;25(22):S10-S15. doi: 10.12968/bjon.2016.25.22.S10.
- 3 Hoeflok J, Salvadalena G, Pridham S, Droste W, McNichol L, Gray M. Use of Convexity in Ostomy Care. Results of an International Consensus Meeting. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(1):55-62. doi: 10.1097/WON.0000000000000291.
- 4 Dati in archivio: Clinical evaluation report: CER-OC-03 Ostomy appliances; V3; 2021-03-09.
- 5 Dati in archivio: R&D Report N° CR1479 Evaluation of the flexibility of 1-Piece Convex systems; BB4DEV35 CR1479 Eval Souplesse PCT Convex Concurrentsrevue CGA-EN; V1; 2022-05-10.
- 6 Dati in archivio: Report on Flexima®/Softima® Key post-marketing user evaluation. Lukas Schaumann. 2005-03-23

B. Braun Medical SA | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | customer-service.ch@bbraun.com | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33