



INTERVENTIONELLE  
GEFÄSSDIAGNOSTIK  
UND -THERAPIE

# NSE™ PTA

PTA Scoring Ballonkatheter

# NSE™ PTA

## PTA SCORING BALLONKATHETER

### NIEDRIGES EINTRITTSPROFIL UND FLEXIBLE SPITZE



- Das Spitzendesign ermöglicht einen verbesserten Läsionseintritt (1)

### FLEXIBLE, FREI BEWEGLICHE ELEMENTE


- Verbesserte Zugänglichkeit in komplexen Läsionen (1)
- Ermöglichen auch in stark gewundenen Gefäßen eine gute Gefäßgängigkeit (2)

### DREIKANTIGE NYLONELEMENTE

- Stabilisieren den Ballon während der Inflation (2)
- Ermöglichen einen effektiven Scoring-Effekt aufgrund der hoch konzentrierten Kraftübertragung (3)

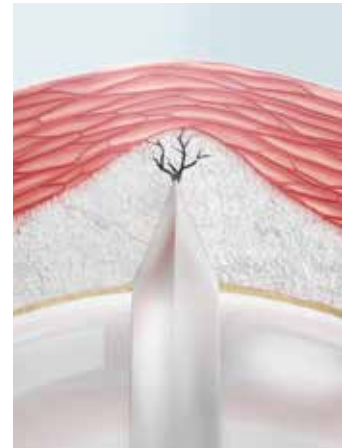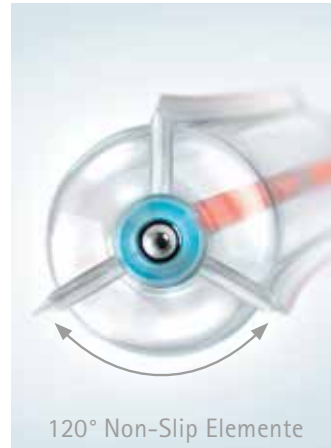

## KATHETER-DESIGN

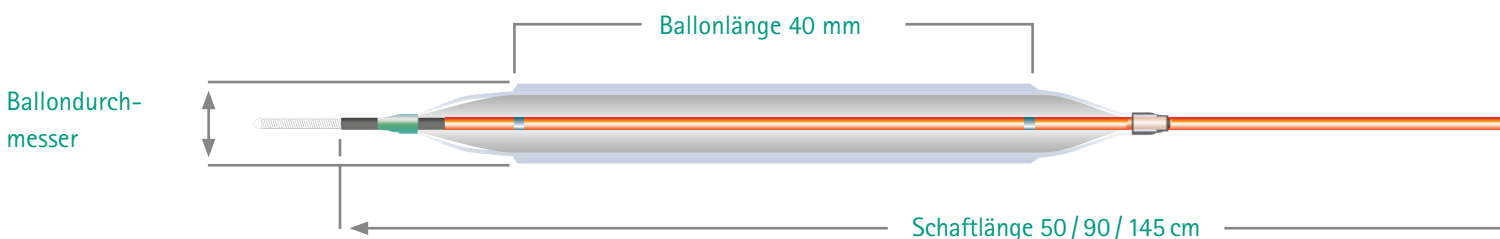

# NSE™ PTA

## PRODUKTTINFORMATIONEN


Artikelnummer	Ballondurchmesser / Ballonlänge	Nominaldruck (atm) (4)	Rated burst pressure (atm) (4)	Schaftlänge	Schleusenkompatibilität (F)
NW18-05040040	4.00 mm / 40 mm	8 atm	18 atm	50 cm	5 F
NW18-05050040	5.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		6 F
NW18-05060040	6.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		5 F
NW18-09040040	4.00 mm / 40 mm	8 atm	18 atm	90 cm	5 F
NW18-09050040	5.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		6 F
NW18-09060040	6.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		5 F
NW18-09070040	7.00 mm / 40 mm	8 atm	14 atm	145 cm	5 F
NW18-14540040	4.00 mm / 40 mm	8 atm	18 atm		6 F
NW18-14550040	5.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		5 F
NW18-14560040	6.00 mm / 40 mm	8 atm	16 atm		6 F
NW18-14570040	7.00 mm / 40 mm	8 atm	14 atm		6 F

1 Data on file at GOODMAN Co. Ltd.

2 Taguchi I et al. Journal of Cardiology 2014;63:19-23.

3 Ashida K et al. J Invasive Cardiol. 2013 Oct;25(10):555-64. PMID: 24088433.

4 Einzelheiten können Sie der Compliance-Tabelle entnehmen.

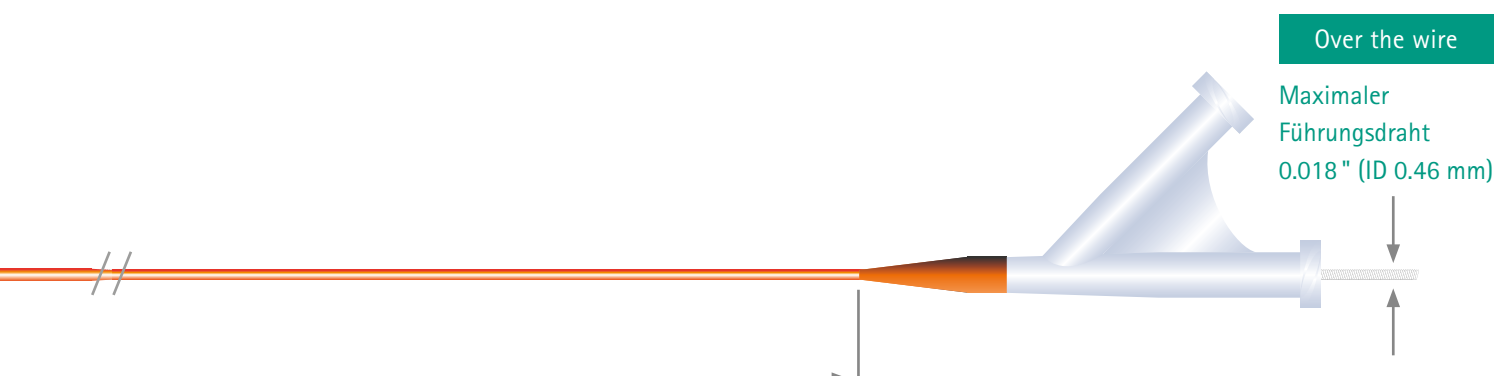

B. Braun Medical AG | Seesatz 17 | CH-6204 Sempach | [customer-service.ch@bbraun.com](mailto:customer-service.ch@bbraun.com) | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32

Hersteller nach MDD 93/42/EWG:

NSE PTA wird hergestellt von Goodman Co., Ltd. (eine Tochtergesellschaft der NIPRO Corporation)

Die Produktmarke „NSE“ ist eine eingetragene Marke von Goodman Co., Ltd.  
Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.