




EXTRA-LONG

# Introcan Safety<sup>®</sup> Deep Access

Cathéters intraveineux de sécurité extra-longs  
en cas d'accès veineux difficile

# Introcan Safety® Deep Access

Cathéters intraveineux de sécurité extra-longs

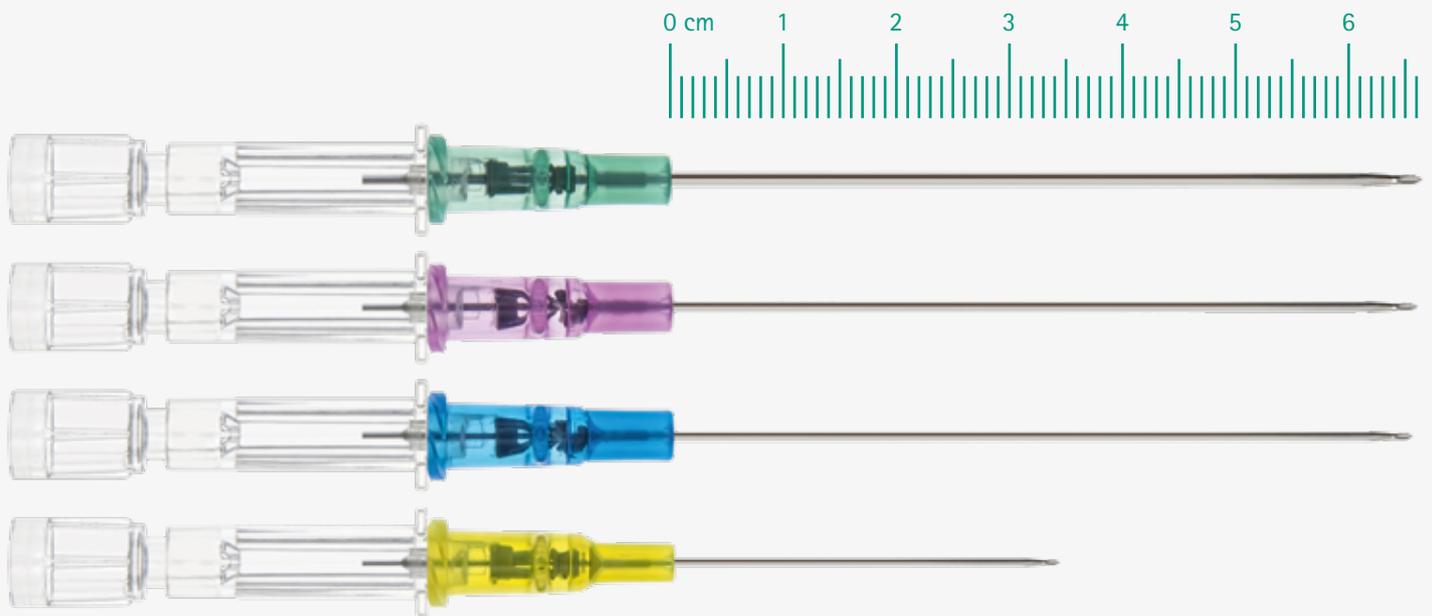


Les cathéters Introcan Safety® Deep Access sont conçus de manière à offrir plus de souplesse dans le choix de veines adéquates, notamment en cas de conditions veineuses difficiles. Par ailleurs le capillaire plus long empêche le cathéter de « glisser » dans la veine après la ponction.

Les cathéters intraveineux de sécurité extra-longs complètent la gamme de produits Introcan Safety®, tout en présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages.

## AVANTAGES

- L'aiguille extra-longue permet d'accéder aux veines plus profondes et offre ainsi davantage d'options à la recherche d'une veine adéquate
- Un cathéter plus long dans la veine contribue à éviter une dislocation de la pointe du cathéter, ainsi que des infiltrations
- Bonne visibilité sous échographie, pour une pose sûre et efficace
- Ponction aisée et indolore grâce à une pointe d'aiguille atraumatique, avec configuration «back cut» du biseau permettant différents angles de ponction
- Mécanisme de sécurité passif : un clip de sécurité neutralise automatiquement le biseau au retrait de l'aiguille

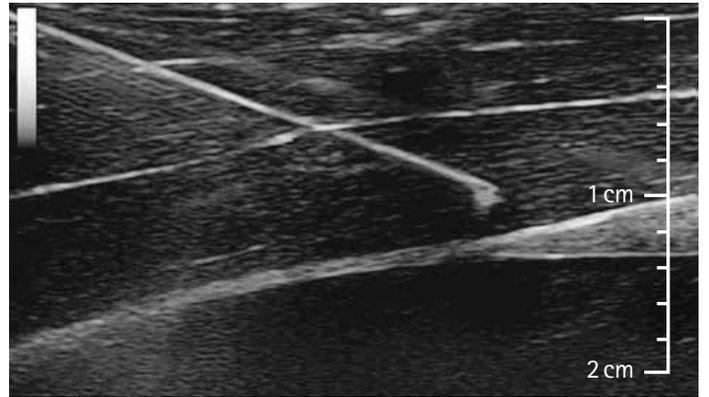

Bien visible sous échographie

Photo originale Introcán Safety®

# Introcan Safety® Deep Access

Aperçu de la gamme

Introcan Safety® Deep Access	Gauge	Longueur mm	ø extérieur mm	Débit (ml/min)	N° art.	Pharmacode
	■ 18	64	1.3	85	4251620-01	7773381
	■ 20	64	1.1	51	4251621-01	7773382
	■ 22	64	0.9	24	4251622-01	7773383
	■ 24	32	0.7	17	4251623-01	7773384

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)