



EINSATZGEBIETE


- Kleine Dekubitalulcera
- Diabetische Fussulcera
- Kleine chirurgische Wunden

Askina[®] DresSil Border Mini

DER KLEINE, SILIKONBESCHICHTETE
SCHAUMSTOFFVERBAND MIT HAFTRAND

Askina® DresSil Border Mini

Der kleine, silikonbeschichtete Schaumstoffverband mit Haftrand

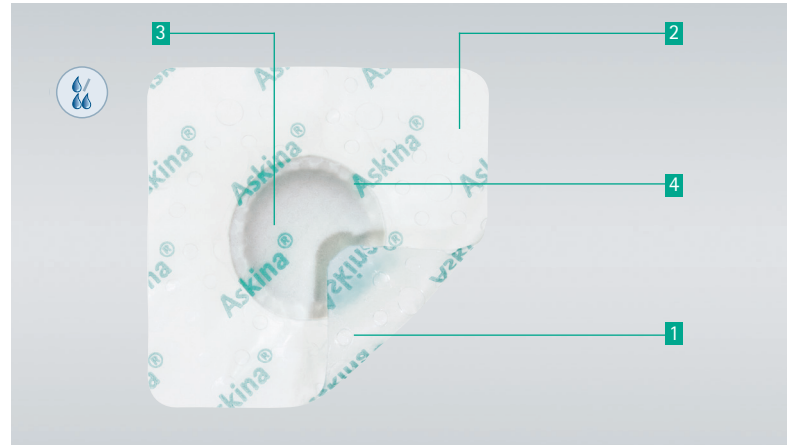


VORTEILE


- Optimal für kleinere Wunden in schwer zu versorgenden Problembereichen
- Einfaches Handling
- Hoher Tragekomfort für den Patienten
- Kann mehrere Tage auf der Wunde verbleiben
- Hypoallergen

Askina® DresSil Border Mini ist atraumatisch zur Wunde und zur wundumgebenden Haut. Die **SILIKON-HAFTFLÄCHE 1** minimiert das Trauma und den Schmerz beim Verbandwechsel, während der **SILIKON-HAFTRAND 2** ein sicheres Fixieren auch an schwierig zu versorgenden Körperstellen ermöglicht.

Der atmungsaktive, hochabsorbierende **POLYURETHAN-SCHAUM 3** gewährleistet ein sehr gutes Exsudatmanagement. Über den transparenten und semipermeablen, für Wasser und Bakterien undurchlässigen **POLYURETHAN-FILM 4** kann das Exsudat verdunsten.

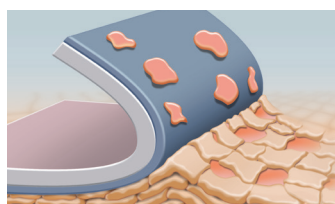

Traditioneller Kleber

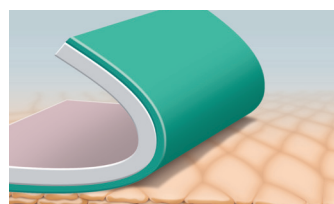

Silikon-Hafttechnologie

SILIKON-HAFTECHNOLOGIE

- Haftet sanft und sicher – auch über mehrere Tage
- Ermöglicht schmerzreduzierten Verbandwechsel
- Unterstützt die Wundheilung durch weitgehenden Erhalt von Granulations- und Epithelgewebe
- Minimiert das Risiko von allergischen Reaktionen
- Unterstützt ein feuchtes Wundmilieu
- Minimiert das Mazerationsrisiko der Wundumgebung

PRODUKTÜBERSICHT

Artikel	Einheit	Art.-Nr.	Pharma-code	MiGeL
Askina® DresSil Border Mini 6 x 6 cm	10	5396610	6394997	35.05.03.01.1

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com