




- Parfait traitement de l'exsudat
- Économie de coûts grâce au rare changement de pansement
- Confort au porter optimal
- Force de rétention élevée
- Aucuns points de pression sous thérapie de compression

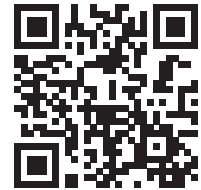

# Askina<sup>®</sup> Foam

LA CLEF POUR UN TRAITEMENT SÛR DE L'EXSUDAT

# Askina® Foam

TRÈS HAUTE CAPACITÉ D'ABSORPTION GRÂCE À UNE EXCELLENTE PROPRIÉTÉ DE RÉTENTION


## PANSEMENT EN MOUSSE À DEUX COUCHES, NON ADHÉSIF

### Couche 1 : film

Film transparent de polyuréthane perméable à la vapeur, imperméable à l'eau et aux bactéries, qui se distingue par une valeur de MVTR parfaite. Perméabilité à la vapeur d'eau : 150 g / 100 cm<sup>2</sup> 24 h


### Couche 2 : mousse

Couche en mousse de polyuréthane hydrophile, respirante et hautement absorbante. L'exsudat de la plaie est absorbé dans la mousse de polyuréthane. Absorption : 59 g / 100 cm<sup>2</sup> / 24 h

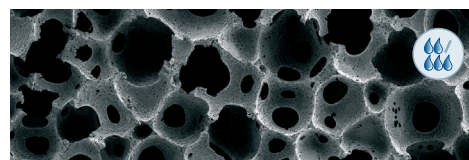



Askina® Foam consiste en une douce mousse de polyuréthane avec une structure cellulaire ouverte. Celle-ci absorbe les liquidités, les retient et empêche en même temps la croissance de tissu de granulation dans le pansement.


## SURVOL DES PRODUITS

Article	Dimensions	Unité	N° art.	Pharmacode	LiMA
<b>Askina® Foam</b> 	Pansement en mousse non adhésif, hautement absorbant, pour plaies moyennement à fortement exsudatives, avec haut pouvoir de rétention. Les fluides absorbés ne seront pas redonnés, même sous forte pression.				
	5 x 7 cm	10	7240710	3987047	35.05.03.01.1
	10 x 10 cm	10	7241010	3987053	35.05.03.03.1
	10 x 20 cm	10	7241210	3987076	35.05.03.04.1
	20 x 20 cm	5	7242005	3987082	35.05.03.06.1

## TRAITEMENT DE CAVITÉS ET DE PLAIES PROFONDES

<b>Askina® Foam Cavity Strips</b> 	Bandelettes non adhésives en mousse douce pour poches de plaies et fistules. Excellent traitement de l'exsudat, s'adaptent à la plaie, confort au porter optimal.				
	2.5 x 40 cm	10	7246010	3996394	35.05.03.03.1
<b>Askina® Trachea</b> 	Pansement en mousse non adhésif, hautement absorbant pour le traitement de canules trachéales et drainages, excellent traitement de l'exsudat, minimisation de la macération du bord de la plaie.				
	9.5 x 8.5 cm	10	7248510	3987107	35.05.03.03.1

## TRAITEMENT DU TALON

<b>Askina® Heel</b> 	Pansement en mousse hautement absorbant de forme anatomique pour les talons, réduction optimal de la pression, protection contre la contamination de la plaie.				
	225 cm <sup>2</sup>	5	7240105	2993821	35.05.03.11.1