



- Eccellente gestione dell'essudato
- Efficienza economica grazie al cambio di medicazione poco frequente
- Comfort ottimale quando è indossata
- Capacità di ritenzione elevata
- Nessun punto di pressione sotto terapia compressiva



Askina[®] Foam

LA CHIAVE PER UNA GESTIONE SICURA DELL'ESSUDATO

Askina® Foam

MASSIMA CAPACITÀ ASSORBENTE ED ECCELLENTI PROPRIETÀ DI RITENZIONE

MEDICAZIONE PER FERITE IN ESPANSO, NON ADESIVA, A DUE STRATI

Strato 1: Film

Film poliuretano trasparente, permeabile al vapore, impermeabile ad acqua e batteri e caratterizzato da un valore MVTR ottimale.


Permeabilità al vapor acqueo: 150 g / 100 cm² / 24 h

Strato 2: Espanso

Strato idrofilo, traspirante, altamente assorbente in espanso poliuretano.


L'essudato della ferita è assorbito nell'espanso poliuretano.

Assorbimento: 59 g / 100 cm² / 24 h

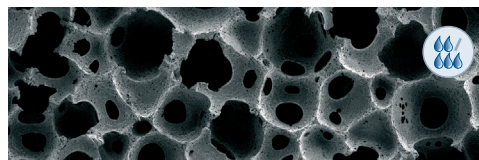



Askina® Foam è realizzata in morbido poliuretano espanso con struttura a celle aperte. Questo materiale assorbe i fluidi, li trattiene e contemporaneamente impedisce la crescita di tessuto di granulazione nella medicazione.


PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Formato	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
Askina® Foam 	Medicazione per ferite in espanso non adesiva, altamente assorbente per ferite da moderatamente a fortemente essudanti con capacità di ritenzione elevata. Nessuna fuoriuscita o cessione di liquidi, nemmeno sotto pressione.				
	5 x 7 cm	10	7240710	3987047	35.05.03.01.1
	10 x 10 cm	10	7241010	3987053	35.05.03.03.1
	10 x 20 cm	10	7241210	3987076	35.05.03.04.1
	20 x 20 cm	5	7242005	3987082	35.05.03.06.1

TRATTAMENTO DI FERITE PROFONDE E CAVITÀ

Askina® Foam Cavity Strips 	Strisce in morbido espanso, non adesive, altamente assorbenti per tasche di ferite e fistole. Eccellente gestione dell'essudato, si adattano alla ferita, comfort d'uso ottimale.				
	2.5 x 40 cm	10	7246010	3996394	35.05.03.03.1
Askina® Trachea 	Medicazione per ferite in espanso non adesiva, altamente assorbente per il trattamento di cannule tracheali e drenaggi, eccellente gestione dell'essudato, minimizza la macerazione dei bordi della ferita.				
	9.5 x 8.5 cm	10	7248510	3987107	35.05.03.03.1

TRATTAMENTO DEL TALLONE

Askina® Heel 	Medicazione per ferite in espanso altamente assorbente per il tallone di forma anatomica, scarico della pressione ottimale, protezione dalle contaminazioni della ferita.				
	225 cm ²	5	7240105	2993821	35.05.03.11.1