

Stimuplex® Ultra 360®  
Ultraplex® 360

# ULTRALINE 360

Blocs nerveux échoguidés

# LA VISIBILITÉ SANS COMPROMIS

Nous avons investi dans la nouvelle Ultraline 360 tout notre savoir et notre expérience, afin de créer une aiguille exceptionnellement échogène, donc parfaitement visible à l'échographie. L'Ultraline 360 produit peu d'artefacts, tout en gardant toutes ses qualités de ponction et de glissement.



## L'AVANTAGE POUR VOUS


- Visibilité maximale à l'échographie grâce aux motifs en X
- Codage de sécurité permettant une identification et un positionnement plus faciles de l'aiguille et de la pointe
- Glissement et ponction optimisés par notre revêtement éprouvé et le biseau Stimuplex® à 30°
- Excellente visibilité de tous côtés grâce à l'application des motifs en X à 360°



# THE NEXT GENERATION

## MOTIFS EN X : EXTRÊMEMENT VISIBLES

Les nouvelles aiguilles Ultraline 360 portent un marquage de sécurité unique en son genre composé de motifs en X. Le nombre élevé d'arêtes permet une excellente réflexion des ondes sonores, même sous les angles de ponction les plus forts.

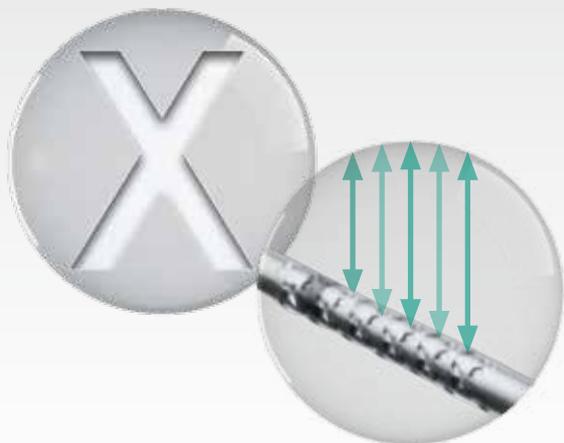

RÉFLEXION DES ULTRASONS


## SAFETY CODE

Avec son codage de sécurité, l'Ultraline 360 de B. Braun aide efficacement à localiser la pointe de l'aiguille. Les motifs en X sont placés sur les 20 premiers millimètres du corps de l'aiguille. Le code en trois parties (« court-court-long ») permet de différencier de façon optimale la pointe de l'aiguille et la partie supérieure du corps.




BISEAU STIMUPLEX® À 30°


## SAFETY CODE

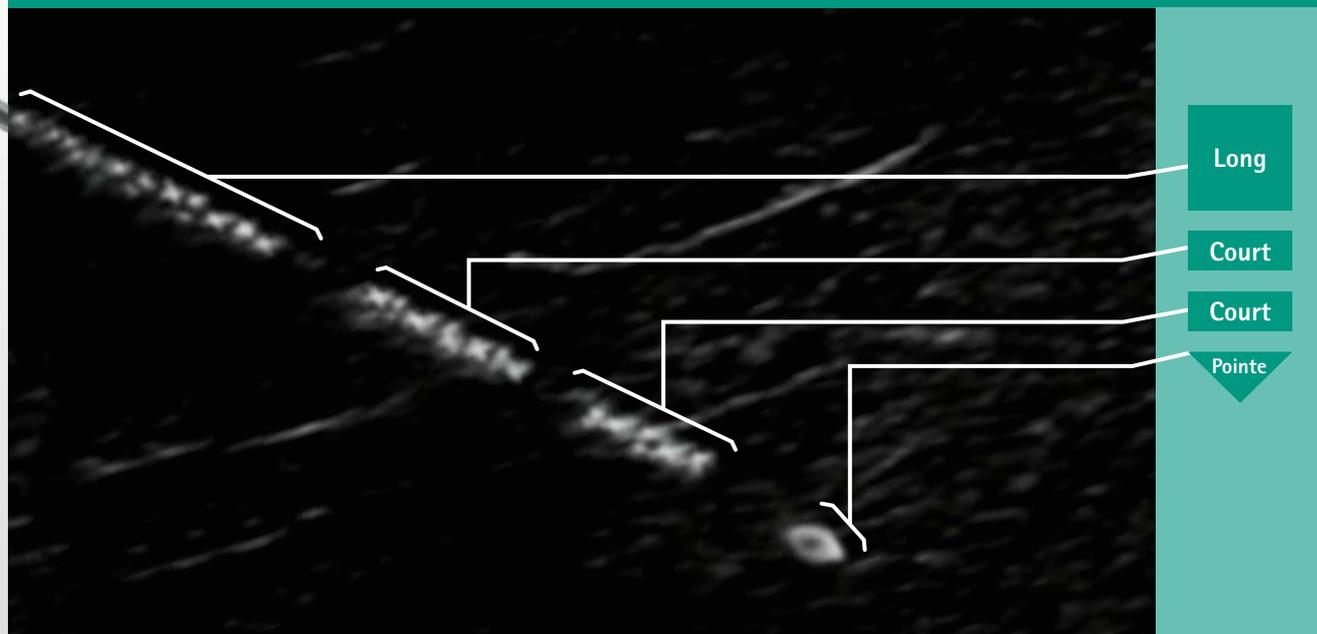

# STIMUPLEX® ULTRA 360® / ULTRAPLEX® 360

Une excellente visibilité, sans compromis

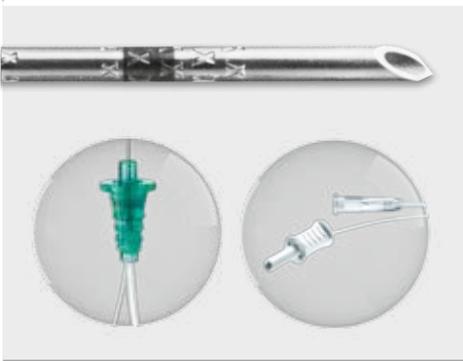Stimuplex® Ultra 360®	Canule ø calibre et longueur (pouces)	Canule ø calibre et longueur (mm)	Unité de vente / Pièce	Référence	Pharmacode
	Canules à biseau 30° avec neurostimulation				
	22 G x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 35	25	4892503-01	6502547
	22 G x 2"	0.70 x 50	25	4892505-01	6502524
	22 G x 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 80	25	4892508-01	6502530
	20 G x 4"	0.90 x 100	25	4892510-01	6502553
	20 G x 6"	0.90 x 150	25	4892515-01	6502576

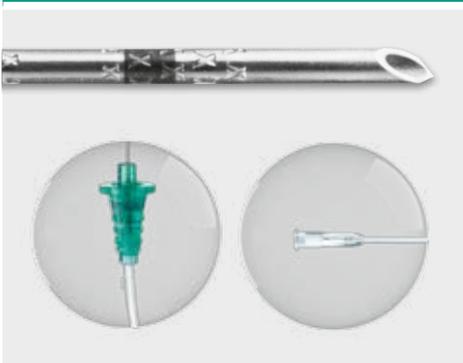Ultraplex® 360	Canule ø calibre et longueur (pouces)	Canule ø calibre et longueur (mm)	Unité de vente / Pièce	Référence	Pharmacode
	Canules à biseau 30° sans neurostimulation				
	22 G x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 35	25	4892603-01	6502636
	22 G x 2"	0.70 x 50	25	4892605-01	6502582
	22 G x 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 80	25	4892608-01	6502599
	20 G x 4"	0.90 x 100	25	4892610-01	6502607
	20 G x 6"	0.90 x 150	25	4892615-01	6502613

## THE NEXT GENERATION

- Marquage à 360° pour une visibilité exceptionnelle
- Revêtement à faible friction pour une introduction et ponction optimale
- Réflexion parfaite des ultrasons par les motifs en X

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)  
 Hospital Market : Tél. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bbraun.com)  
 Out Patient Market : Tél. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bbraun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bbraun.com)