

Stimuplex® Ultra 360®  
Ultraplex® 360

## ULTRALINE 360

Ultraschall geführte Nervenblockaden

# SICHTBARKEIT OHNE KOMPROMISS

In die neue Ultraline 360 haben wir all unser Wissen und Erfahrung investiert, um eine Nadel mit ausgezeichneter echogener Sichtbarkeit zu erzeugen. Ultraline 360 bietet eine sehr gute Sichtbarkeit im Ultraschall mit weniger Artefakten unter Beibehaltung der allgemein anerkannten Punktions- und Gleiteigenschaften.



## IHR NUTZEN


- Höchste Sichtbarkeit im Ultraschall durch X-Muster
- Der Safety Code ermöglicht eine einfachere Identifikation sowie Positionierung der Nadel und Nadelspitze
- Optimales Gleit- und Punktionsverhalten durch unsere bewährte Beschichtung und den Stimuplex® 30° Schliff
- Ausgezeichnete Sichtbarkeit von jeder Seite durch eine 360° Anbringung des X-Musters



# THE NEXT GENERATION

## X-MUSTER: EXTREME SICHTBARKEIT

Die neuen Ultraline 360-Nadeln haben ein unverwechselbares Sicherheits-X-Muster. Die hohe Anzahl an Kanten ermöglicht eine ausgezeichnete Reflektion der Ultraschallwellen, auch bei steilerem Einstichwinkel.

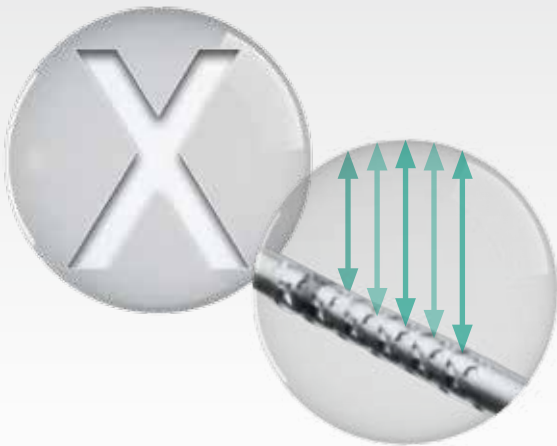

REFLEKTION DER ULTRASCHALLWELLEN


## SAFETY CODE

Die B. Braun Ultraline 360 bietet mit ihrem Safety Code eine ideale Unterstützung bei der Lokalisation der Nadelspitze. Das X-Muster ist auf den ersten 20 mm des Nadelschafts platziert. Der in drei Segmente geteilte Code «kurz-kurz-lang» ermöglicht eine optimale Unterscheidung zwischen der Nadelspitze und dem oberen Nadelschaft.



STIMUPLEX® 30° SCHLIFF

## SAFETY CODE

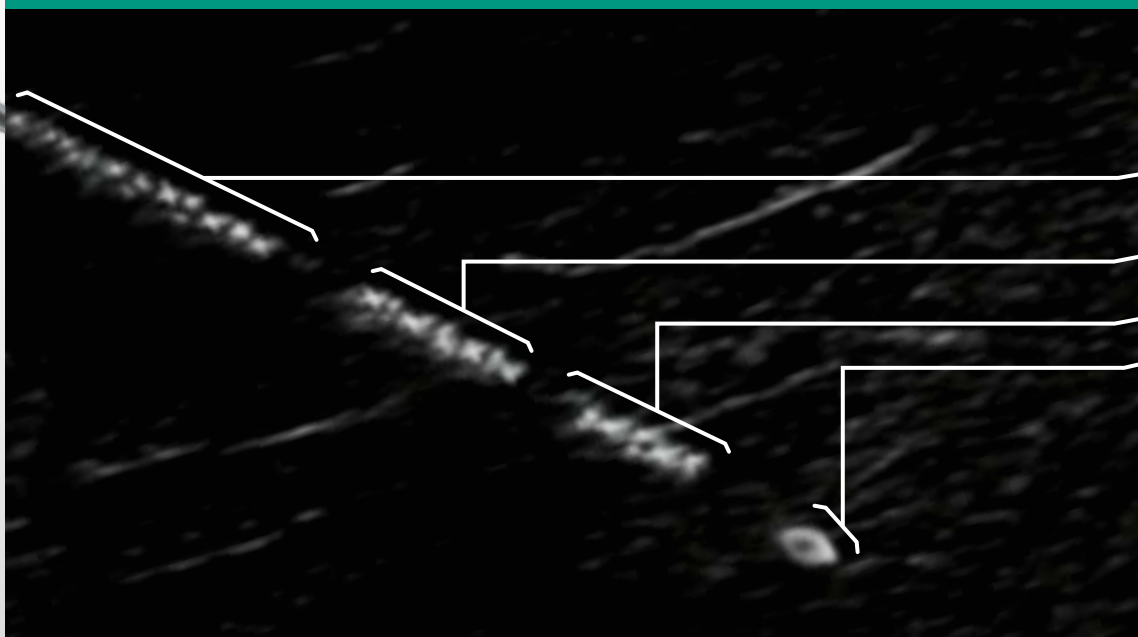

Lang


Kurz


Kurz

Spitze

# STIMUPLEX® ULTRA 360® / ULTRAPLEX® 360

Ausgezeichnete Sichtbarkeit ohne Kompromiss

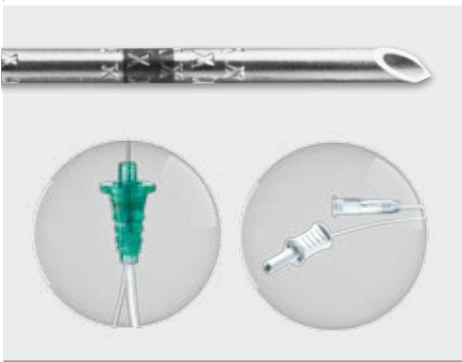Stimuplex® Ultra 360®	Kanüle Ø Gauge und Länge (Zoll)	Kanüle Ø und Länge (mm)	VE/ Stück	Artikel- nummer	Pharmacode
	Kanülen mit 30° Schliffgeometrie mit Nervenstimulation				
	22 G x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 35	25	4892503-01	6502547
	22 G x 2"	0.70 x 50	25	4892505-01	6502524
	22 G x 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 80	25	4892508-01	6502530
	20 G x 4"	0.90 x 100	25	4892510-01	6502553
	20 G x 6"	0.90 x 150	25	4892515-01	6502576

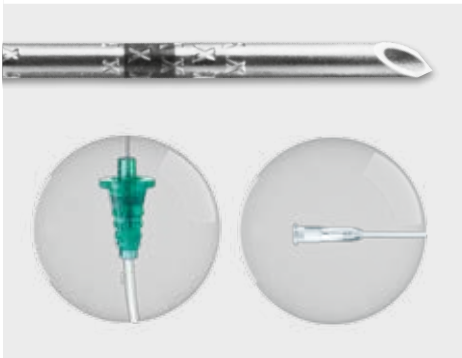Ultraplex® 360	Kanüle Ø Gauge und Länge (Zoll)	Kanüle Ø und Länge (mm)	VE/ Stück	Artikel- nummer	Pharmacode
	Kanülen mit 30° Schliffgeometrie ohne Nervenstimulation				
	22 G x 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 35	25	4892603-01	6502636
	22 G x 2"	0.70 x 50	25	4892605-01	6502582
	22 G x 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	0.70 x 80	25	4892608-01	6502599
	20 G x 4"	0.90 x 100	25	4892610-01	6502607
	20 G x 6"	0.90 x 150	25	4892615-01	6502613

## THE NEXT GENERATION

- 360° Markierung für ausgezeichnete Sichtbarkeit
- Hochwertige, reibungsarme Beschichtung für optimales Gleit- und Punktionsverhalten
- Perfekte Reflektion der Ultraschallwellen durch X-Muster

B. Braun Medical AG | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | [www.bb Braun.ch](http://www.bb Braun.ch)  
 Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | [sales-hospital.bbmch@bb Braun.com](mailto:sales-hospital.bbmch@bb Braun.com)  
 Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | [sales-opm.bbmch@bb Braun.com](mailto:sales-opm.bbmch@bb Braun.com)