



Infusomat[®] plus Line Portfolio

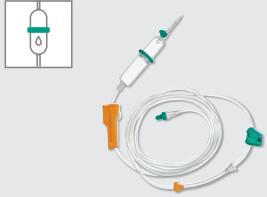
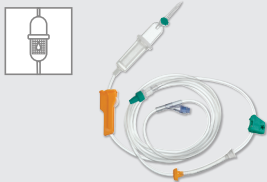
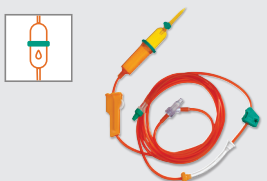
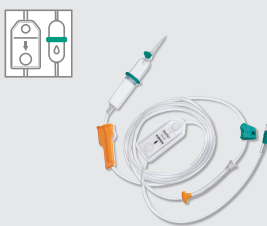
Portfolio & Produktinformationen

Infusomat[®] plus Line

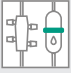
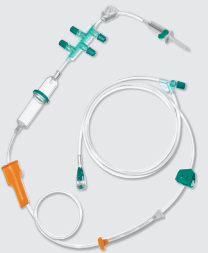
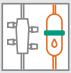



Portfolio & Produktinformationen

Intuitiv & sicher

Farbliche Kennzeichnung und optimal aufeinander abgestimmte Formgebung erleichtern das Einlegen der Infusomat[®] plus Leitungen in die Infusomat[®] compact^{plus} Pumpe. Das spezielle Schlauchmaterial sorgt für gleichbleibende Genauigkeit über lange Zeiträume (bis zu 96 h). Die Anti-Free-Flow-Klemme schliesst beim Öffnen der Klappe automatisch die Leitung, um einen Free-Flow zu verhindern. Dank der intuitiven Bedienoberfläche und seinen grafischen Hinweisen ist eine reduzierte Einarbeitungszeit gegeben.

Infusomat [®] plus Line	Beschreibung	Schlauchmaterial*	Länge (cm)	Füllvolumen (ml)	Y-Port	Art.-Nr.
SafeSet						
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm-Flüssigkeitsfilter Tropfkammer mit AirStop-Funktion 	PVC	240/150	17.3	–	8700200
		PVC	300/200	21.2	–	8700210
		PUR	240/150	17.8	–	8700220
		PVC	300/200	22.2	nadelfrei	8700240
		PUR	300/200	22.9	nadelfrei	8700250
Transfusion						
	<ul style="list-style-type: none"> 200 µm-Blutfilter 	PVC	240/150	17.3	–	8700350
		PVC	300/200	21.9	nadelfrei	8700360
UV-protect						
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm-Flüssigkeitsfilter Tropfkammer mit AirStop-Funktion 	PUR	240/150	17.8	–	8700260
		PUR	300/200	22.9	nadelfrei	8700270
Onkologie						
	<ul style="list-style-type: none"> 15 µm-Flüssigkeitsfilter Hydrophiler 0.2 µm-Flüssigkeitsfilter (Sterifix[®]) Tropfkammer mit AirStop-Funktion Eurofix Spinlock Patientenzugang 	PUR	240/150	20.6	–	8700300

* PVC = DEHP-frei; PUR = PVC- / DEHP-frei

Infusomat ^{® plus} Line	Beschreibung	Schlauchmaterial*	Länge (cm)	Füllvolumen (ml)	Y-Port	Art.-Nr.
Cyto-Set[®] AirStop						
 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tropfkammer mit AirStop-Funktion 	PUR	210/155	23.9	3 nadelfreie Ventile	8700420
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Griffplatte mit eingebauten Rückschlagventilen ▪ Zytostatikabeständiges Material 	PUR	210/155	23.9	5 nadelfreie Ventile	8700430
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eurofix Spinlock Patientenzugang ▪ Hydrophiler 0.2 µm-Flüssigkeitsfilter (Sterifix[®]) 	PUR	225/170	27.4	5 nadelfreie Ventile	8700460
Cyto-Set[®] UV-protect						
 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz vor Licht mit Wellenlängen bis 520 nm 	PUR	210/155	23.9	3 nadelfreie Ventile	8700440
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tropfkammer mit AirStop-Funktion ▪ Griffplatte mit eingebauten Rückschlagventilen ▪ Zytostatikabeständiges Material ▪ Eurofix Spinlock Patientenzugang 	PUR	210/155	23.9	5 nadelfreie Ventile	8700450
Enterale Ernährung ENFit[™]						
 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inline-Tropfkammer 	PUR	330/220	28.0	nadelfrei	8700370
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ENFit[™]-Konnektor für den Patientenzugang 	PVC	330/220	23.1	nadelfrei	8700400
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ENPlus-Einsteckdorn für Produkte zur enteralen Ernährung mit ENPlus (Cross) Port ▪ 3-Weg-Hahn mit ENFit[™]-Konnektor für ENFit[™]-Spritze 	PVC	260/150	18.5	nadelfrei	8700380

*PVC = DEHP-frei; PUR = PVC-/DEHP-frei

B. Braun Medical AG | Hospital Care & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Care Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com