



CAMPI D'IMPIEGO

- Ferite non essudanti come:
 - Ferite chirurgiche
 - Ferite acute
 - Ferite cronico
- Fissaggio di medicazioni primarie

Askina[®] Derm

PELLICOLA PER MEDICAZIONI SOTTILE, TRASPARENTE

Askina® Derm

PER PROTEZIONE O FISSAZIONE

La medicazione in pellicola sterile semipermeabile in poliuretano protegge le ferite secche, consentendone al contempo il controllo visivo. Le ferite sia acute che chirurgiche sono medicate in tutta sicurezza.


USO



Rimuovere la carta protettiva stampata dal lato adesivo della medicazione



Posizionare la medicazione sulla ferita con il lato adesivo rivolto verso il basso e farla aderire delicatamente

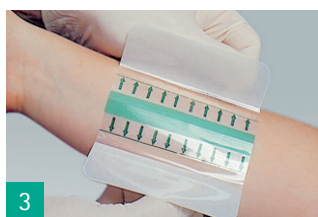

Con entrambe le mani rimuovere lentamente la pellicola protettiva laterale e premere la medicazione sulla cute integra con movimenti tendenti a distenderla



Dopo il fissaggio della medicazione rimuovere la pellicola di supporto con le frecce verdi nella direzione della freccia

VANTAGGI

- Film poliuretano impermeabile a fluidi e batteri – **elevata protezione dalle infezioni**
- Elevata permeabilità all'aria e al vapor acqueo – **assenza di macerazione** con contemporaneo mantenimento dell'ambiente umido della ferita
- Adesivo ipoallergenico a base di acrilato – **facilmente staccabile, perfettamente tollerabile**
- Trasparente – **consente il controllo visivo**
- Sottilissimo – **comodo**, si adatta alla morfologia
- **Manipolazione semplice e sicura** – fissaggio sicuro anche nelle parti del corpo difficili

PANORAMICA DEI PRODOTTI

Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
6 x 7 cm	100	F72033	2600388	35.05.10.01.1
10 x 12 cm	50	F72036	2600359	35.05.10.03.1
15 x 20 cm	10	F72038	2600371	35.05.10.05.1

B. Braun Medical SA | Hospital & Out Patient Market | Seesatz 17 | 6204 Sempach | www.bbraun.ch
Hospital Market: Tel. 0848 83 00 44 | Fax 0800 83 00 43 | sales-hospital.bbmch@bbraun.com
Out Patient Market: Tel. 0848 83 00 33 | Fax 0800 83 00 32 | sales-opm.bbmch@bbraun.com