



# Askina® Pad / Askina® Pad S

compressa assorbente in TNT

## Campi d'impiego


- Per il trattamento di ferite cutanee di tutti i tipi in traumatologia, dermatologia e chirurgia
- Quale medicazione secondaria nelle ferite infette

# Askina® Pad / Askina® Pad S

compressa non adesiva per un comfort ottimale del paziente

Le compresse in TNT **Askina® Pad** e **Askina® Pad S** sono estremamente assorbenti. Il film microperforato sul lato della ferita impedisce aderenze alla ferita stessa. Inoltre sono estremamente morbide e flessibili e assicurano una buona imbottitura della ferita. Grazie alla tranquillità assicurata alla ferita, è possibile eseguire cambi di medicazione delicati e indolori favorendo così il processo di guarigione.

## Il sistema a tre strati

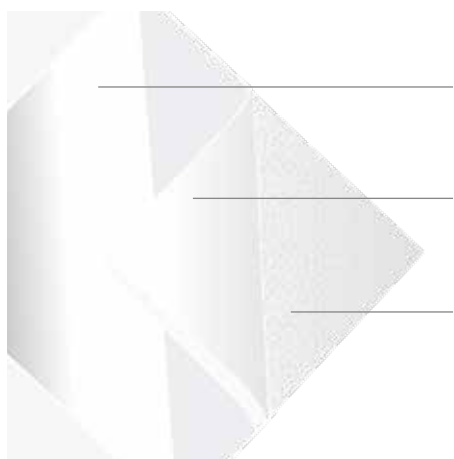

**1 Lato superiore in TNT resistente**

L'imbottitura non si sfilaccia

**2 Imbottitura in fibra acrilica di cotone multistrato**

Particolarmente assorbente, effetto imbottitura ottimale

**3 Film in poliestere reticolare**

Niente aderenze alla ferita, rapido trasporto delle secrezioni grazie al reticolato microfine

### Vantaggi

- Compressa in TNT sterile estremamente assorbente
- Funge da imbottitura per la ferita e accelera il processo di guarigione grazie a cambi di medicazione senza problemi
- È adatta sia per la guarigione postoperatoria della ferita che per le prime cure

## Panoramica dei prodotti

	Articolo	Unità	Cod. art.	Pharmacode	EMAp
	<b>Askina® Pad</b>				
	5 x 5 cm	100	WIN9024018	1021238	35.01.02.01.1
	10 x 10 cm	100	WIN9024034	1021237	35.01.02.03.1
	<b>Askina® Pad S (compressa fessurata)</b>				
	10 x 10 cm	100	WIN9024010	1021239	35.01.02.03.1